

Höhenverstellbarer Betteinsatz Lippe IV zum Einbau in ein vorhandenes Bett



Höhenverstellbarer Betteinsatz Lippe IV

> Ausführung

Liegefläche viergeteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24 Volt Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar. Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Liegefläche kopfseitig mit zwei im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie vier Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes.

Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar. Liegehöhenverstellung von ca. 29 cm bis 74 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: 29 cm, sichere Arbeitslast: 200 kg

Gefertigt nach (in Anlehnung):

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > Norm DIN EN 60601-2-52:2009

> Bestell-Nummern, Maße

Bestell-Nummern	Liegeflächen-Nennmaß :	tatsächliches Liegeflächenmaß	Bestell-Nummern	Liegeflächen-Sondermaße:	tatsächliches Liegeflächenmaß
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm	30.9456.8	90 x 180 cm	85 x 175 cm
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm	30.9456.7	80 x 180 cm	75 x 175 cm
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm	30.9456.6	80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm	30.9456.5	80 x 200 cm	75 x 195 cm

> Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)

Lager-/ Transporthilfe (ohne Abbildung)



Aufrichter



Seitenschutz (auch nachträglich montierbar)




Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm)



Verbreiterungsschiene 5 cm

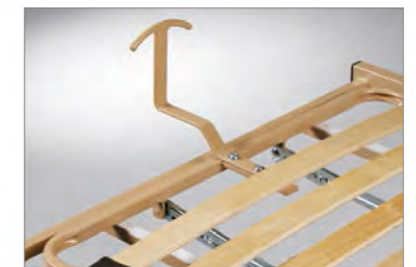

Matratzenbügelgriff im Fußbereich (erhöhte Ausführung)